



## Sugslang Mediplast

- Ett heltäckande sortiment av sugslangar i olika utförande. Alla våra slangar håller hög kvalitet och är smidiga, knickresistenta och vacuumstabila
- Slangarna finns som PVC-fria eller i PVC med mjukgörare
- Förpackningar:  
Steril – dubbelpackade i peel-pack  
Osteril – hygienpackade i peel-pack  
Slang på rulle – hygienpackade i dispenserbox
- Standard, sugslang: EN10079-3:2014  
Standard, bubbelslang: EN13544-2:2002 + A1:2009

Trp.fp = min.kvant/best

## Sugslang, standard, räfflad slang

Slangen packas först i en påse, sedan i en peel pack för en korrekt steril hantering. Slangarnas yta är räfflad, vilket gör att de tål ett högt vacuum. De har god transparens, som gör att innehållet kan inspekteras.

## PVC med mjukgörare DOTP/DEHT (ftalatfri) eller DINP

Art. nr.	Konnektorer	Längd	ID / YD mm	Material	Hårdhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099900 6099901 6099903 6099905		200 cm 75 cm 250 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 50 50 40
6099954		300 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	75	30	EO	40
6099910 6099915		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099920 6099921 6099925		200 cm 200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Osteril EO	50 50 40
6099930		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099940		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099942		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Osteril	50
6099950		200 cm	7 / 10	PVC DINP	75	30	EO	50
6099956 6099957		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Osteril	50
6099959		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099063 6099064				K-resin	75	25	EO Osteril	400 1000*/2000

\*Avd.fp = min.kvant/best

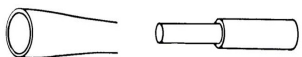



## PVC-Fria

Art. nr.	Konnektorer	Längd	ID / YD mm	Hårdhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6088800 6088805		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50 40
6088810		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50
6088850 6088851		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO Osteril	50

Trp.frp = min.kvant/best


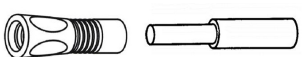




### Sugslang, special, slät slang - ftalatfri PVC

Ena änden är bubblslang (konnektorslös ID/YD 7,5/10 mm) och den andra har en specialkonnektor, med eller utan vacuumkontroll.

Art. nr.	Konnektorer	Längd	ID / YD mm	Material	Hårdhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099979		350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	40
6099980		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Osteril	50
6099982		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Osteril	50
6099985		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Osteril	50

### Sugslang, ÖNH, slät slang - PVC med mjukgörare DOTP/DEHT (ftalatfri) eller DINP

Vi erbjuder ett urval av sterila och osterila slangar som är specifikt framtagna för Öron-näsa hals området. Slangarna har speciellt utformade konnektorer som passar till bronko/esofagoskopi, nasal- och öronsugar. Slangen är generellt mjukare, dvs lägre Shore (hårdhet).

Art. nr.	Konnektorer	Längd	ID / YD mm	Material	Hårdhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6066152100 6066153510		200 cm 350 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	73 - 75	30	EO	50 40
6099990 6099992		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40
6099977 6099978		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099996		350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	40
6099987		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	60 - 63	25	EO	50
6099998 6099999		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40

Trp.frp = min.kvant/best

## Sugslang abort med 360° roterande handtag, DEHP-fri PVC

En högflödesslang som passar till alla engångskyretter.

Art. nr.	Konnektorer	Längd	ID / YD mm	Hårdhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6070002		200 cm	9,6 / 14,5	75	45	EO	15

## Sugslang special, utan konnektorer, transparent PVC, slät slang

Denna släta slang är styckförpackad i peel-pack och är en mjukare slang utan konnektorer, dvs man kopplar direkt på slangen.

Art. nr.	Konnektorer	Längd	ID / YD mm	Hårdhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099965	–	150 cm	7 / 10	68 - 70	30	EO	50

## Bubbelslang på rulle, PVC med mjukgörare ATBC, slät slang

Osteril bubbelslang levereras i rulle. Den är hygienförpackad i en praktisk dispenserbox, färdig att klippas i önskad längd. Slangen har ”bubblor” som återkommer var 90e cm. Klippes slangen mitt i bubblan får man en automatiskt en konnektor med något större diameter än resten av slangen.

Art. nr.	Konnektorer	Längd	ID / YD mm	Färg	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099970-1	–	30 m	3/5 - 8/10	Grön	15	Osteril	1*/5
6099975-1			3/5 - 8/10		15		
6099973-1	–	30 m	5/7 - 10/12	Transparent	21	Osteril	1*/5
6099976-1			7/10 - 11/14		30		

\*Avd.fp = min.kvant/best

## Bubbelslang, klippt i längder om 180 cm med bubblor i ändarna, PVC med mjukgörare ATBC, slät slang

Art. nr.	Färg	Längd	ID / YD mm	Hårdhet	Ch	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6099960-1	Grön		3/5-8/10		15		
6099966-1	Transparent	180 cm	5/7-10/12	68 - 70	30	Osteril	50

Trp.fp = min.kvant/best

### Slät slang på rulle, transparent ftalatfri PVC, mjukgörare TEHT

Denna osterila, helt släta slang med hårdhet 73-75 levereras i rulle. Slangen är hygienförpackad i en praktisk dispenserbox, färdig att klippas i önskad längd.

Art. nr.	Konnektorer	Längd	ID / YD mm	Sterilisering	Avd/Trp.frp
6091620084	–	40 m	8 / 11	Osteril	1
6091620090	–	40 m	8 / 12	Osteril	1

Trp.fp = min.kvant/best