

Veterinärprodukter i världsklass

Nya Exigo H400

- Komplet blodstatus från bara en droppe blod
- Användarvänlig
- 12 förinställda djurprofiler
- Robust och pålitlig



Boule presenterar ett nytt hematologisystem – Exigo H400

Komplett blodstatus från bara en droppe blod. Ett underhållsfritt hematologisystem med 12 förinställda djurprofiler. Exigo H400 har en reagensbaserad eosinofilmetod som ger en 4-part differentiering av de vita blodcellerna. En kvalitetsmetod för en av de svåraste parametrarna du behöver mäta!


Precis som tidigare modeller av Exigo, är Nya Exigo H400 ett robust och pålitligt hematologisystem. De förbättringar som införts är bland annat:

- En högupplöst, användarvänlig pekskärm
- Förbättrad anslutningsmöjlighet
- Mer kraftfull programvara med praktiska förbättringar såsom ett utökat provminne till 50 000.

Precis som tidigare modeller lämpar sig Exigo H400 särskilt bra för riktigt små blodvolymmer. Med den patenterade mikropipett-adaptorn, MPA, kan full blodstatus fås från bara 20 µL blod. Automatisk rengöring av systemet gör att Exigo H400 är helt underhållsfri för användaren.



exigo

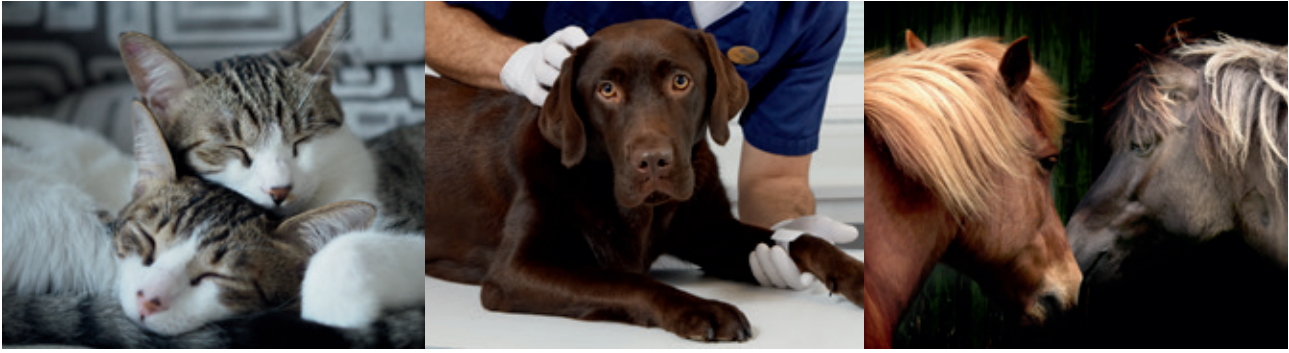

12 förinställda djurprofiler

Avancerad, reagensbaserad 4-part differentiering av vita blodceller, inklusive eosinofila granulocyter för hund, katt och häst. Högkvalitativ 3-part differentiering för ko, iller, kanin, får, råtta, mus, gris, kameloid och get.

Exigo H400 erbjuder en 4-parts differentiering av vita blodkroppar: lymfocyter, monocyter, neutrofila och eosinofila granulocyter.

Specifikation

- Helautomatiskt instrument med 19 parametrar:
LPK, LYM abs, MON abs, NEU abs,
EOS abs, LYM%, MON%, NEU%, EOS%
EPK, MCV, EVF, TPK, MPV, HB, MCH,
MCHC, RDW%, RDW abs
- 12 förinställda djurprofiler
- Avancerad LPK-differentiering:
med 4-part för hund, katt och häst
med 3-part för ko, iller, kanin, får, råtta, mus, gris,
kameloid och get
- Möjlighet till direktanalys av små blodvolymmer
- Inbyggd mixer
- 7" pekskärm i färg
- Hematologiska riktlinjer för patologiska prover
- Underhållsfri – automatisk rengöring
- QC-program
- Extern streckodsläsare ingår
- Kapacitet på upp till 53 prov i timmen
- USB-port



Dimensioner och vikt (exklusive reagens)

Dimensioner (HBD): 395 x 295 x 475 mm
Vikt: 18 kg

Boule Diagnostics AB
Domnarvsgatan 4
SE-163 53 Spånga, Sweden
Telefon +46 8 744 77 00
Fax +46 8 744 77 20
E-post info@boule.com
www.boulemedical.se

exigo